

TopClean 60

Profesjonalna dbałość o higienę



TopClean 60 w szczegółach



TopClean 60

Zmechanizowane mycie na najwyższym poziomie



Wysokość załadunku

wys. 420 mm

Wymiary urządzenia

wys. 820–850 mm, szer. 600 mm,
głęb. 600 mm

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy dotyczą w tym samym zakresie personelu i pacjentów!

W celu zapewnienia ochrony personelu i pacjentów w kwestiach związanych z higieną, specjaliści w tym zakresie wymagają stosowania standaryzowanych, a tym samym zmechanizowanych procesów mycia i dezynfekcji.

Innowacyjny „Multi-Washer” *TopClean 60* stanowi połączenie niezawodnych wymogów higieny, bezpieczeństwa pracy oraz ekonomicznej wydajności.

Istnieje możliwość wyboru preferowanej metody dezynfekcji:

Dezynfekcja termiczna

maksymalna higiena z wartością A_0 60 dezynfekcji

Dezynfekcja chemotermiczna

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości środków chemicznych i odpowiedniej temperatury obuwie operacyjne zostaje prawidłowo zdezynfekowane

Korzyści:	Dezynfekcja termiczna	Dezynfekcja chemotermiczna
Maksymalna higiena, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości środków chemicznych i odpowiedniej temperatury. Obuwie operacyjne jest całkowicie zdezynfekowane	–	•
Optymalna higiena z wartością A_0 60 dezynfekcji	•	–
Szybka dostępność obuwia dzięki krótkim czasom cykli	•	•
Ustandaryzowane, a tym samym bezpieczne procesy higieniczne	•	•
Nieskontaminowane stanowiska pracy dzięki czyszczeniu mechanicznemu	•	•
Oszczędne procesy czyszczenia i dezynfekcji dzięki ekonomicznym rozwiązaniom poboru prądu, wody i środków chemicznych	•	•
Bezpieczeństwo i ochrona pracy dzięki automatycznemu zablokowaniu/odblokowaniu drzwi	•	•
Zaangażowany i zmotywowany personel, dysponujący czasem dla pacjentów	•	•

Profesjonalny proces utrzymania higieny

- Łatwa i przyjazna dla użytkownika obsługa za pomocą klawiatury membranowej z wyświetlaczem
- Elastyczne rozwiązania higieniczne dzięki trzem programom:
 - program krótki
 - program normalny
 - program intensywny
- Funkcja wymiany wody w programie intensywnym do uporczywych zabrudzeń
- Bezpieczeństwo dzięki automatycznemu zablokowaniu/odblokowaniu drzwi
- Optymalna technologia filtrów dokładnego czyszczenia *AktivPlus* zapewniająca znakomite efekty mycia
- Idealna wysokość załadunku 420 mm – odpowiednia również do pojemników transportowych i wiader o pojemności 10 l
- Elastyczna wysokość robocza dzięki możliwości regulacji wysokości urządzenia i zastosowania różnych, alternatywnych cokołów
- Łatwa integracja ze szpitalnymi procesami utrzymania higieny
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni sal poprzez podpłatową zabudowę



Uniwersalny kosz SK 500 z opcjonalnym trzpieniem do optymalnego ułożenia mytych przedmiotów (opcja)




Kosz SK 500-1 na buty operacyjne (opcja)



Kosz SK 500-2 na tace (opcja)

W pełni elektroniczne sterowanie na podczerwień

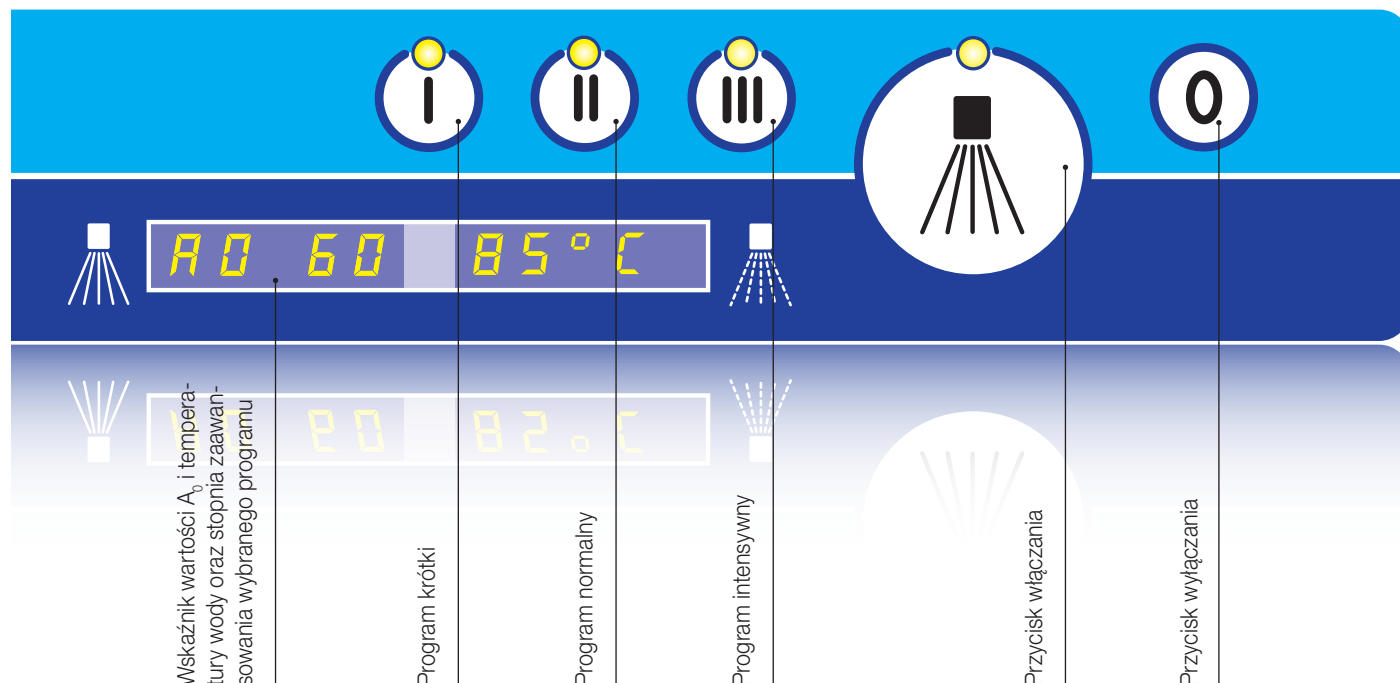

Komfort obsługi ze wskaźnikiem postępu: elektroniczny układ sterowania

Urządzenia MEIKO do mycia i dezynfekcji są seryjnie wyposażone w najnowszy, w pełni elektroniczny układ sterowania *MIKE 2*. Jeden z trzech programów można w łatwy sposób wybrać wciskając lekko określony przycisk. Przebieg pracy i ewentualne komunikaty są wskazywane na wyświetlaczu. Zrozumiałe symbole i przejrzyste wyświetlane temperatury mycia i nabłyszczania sprawiają, że obsługa i kontrola są wyjątkowo łatwe.

MIKE 2 – nowy układ elektroniczny ze zintegrowanym złączem podczerwieni

W połączeniu z inteligentnym modulem *M-Commander W* można teraz w prosty sposób odczytywać, definiować, zmieniać, przysyłać przez komputer lub online dane do zakładu lub obsługi klienta i w ten sposób umożliwić ich natychmiastowe przetworzenie. Jest to dla klienta niewątpliwa zaleta w przypadku konserwacji, gdy chodzi o czas, nakłady pracy i koszty.



Wyposażenie dodatkowe

Najwyższa jakość wody dzięki zastosowaniu odwróconej osmozy



Instalacja odwróconej osmozy z podzespołami bezpieczeństwa:

- Zasuwa odcinająca
- Filtr dokładnego czyszczenia 10 μm z aktywnym węglem

Korzyści:

- Pierwszorzędne rezultaty czyszczenia
- Dłuższe odstępy między konserwacjami
- Zwiększenie żywotności podzespołów urządzenia
- Oszczędność detergentu i nablyszczacza

Zasada działania instalacji z odwróconą osmozą




Specjalne dostosowanie do TopClean 60

- Detergent **RF 90** (opcja): do intensywnego mycia wszystkich stosowanych przyborów
- Nablyszczacz **GT 500** (opcja): w celu uzyskania optymalnych efektów mycia i szybkiego suszenia przyborów



Przykład integracji urządzenia TopClean 60 w pomieszczeniu sanitarnym zamiast w dziale zapewnienia higieny


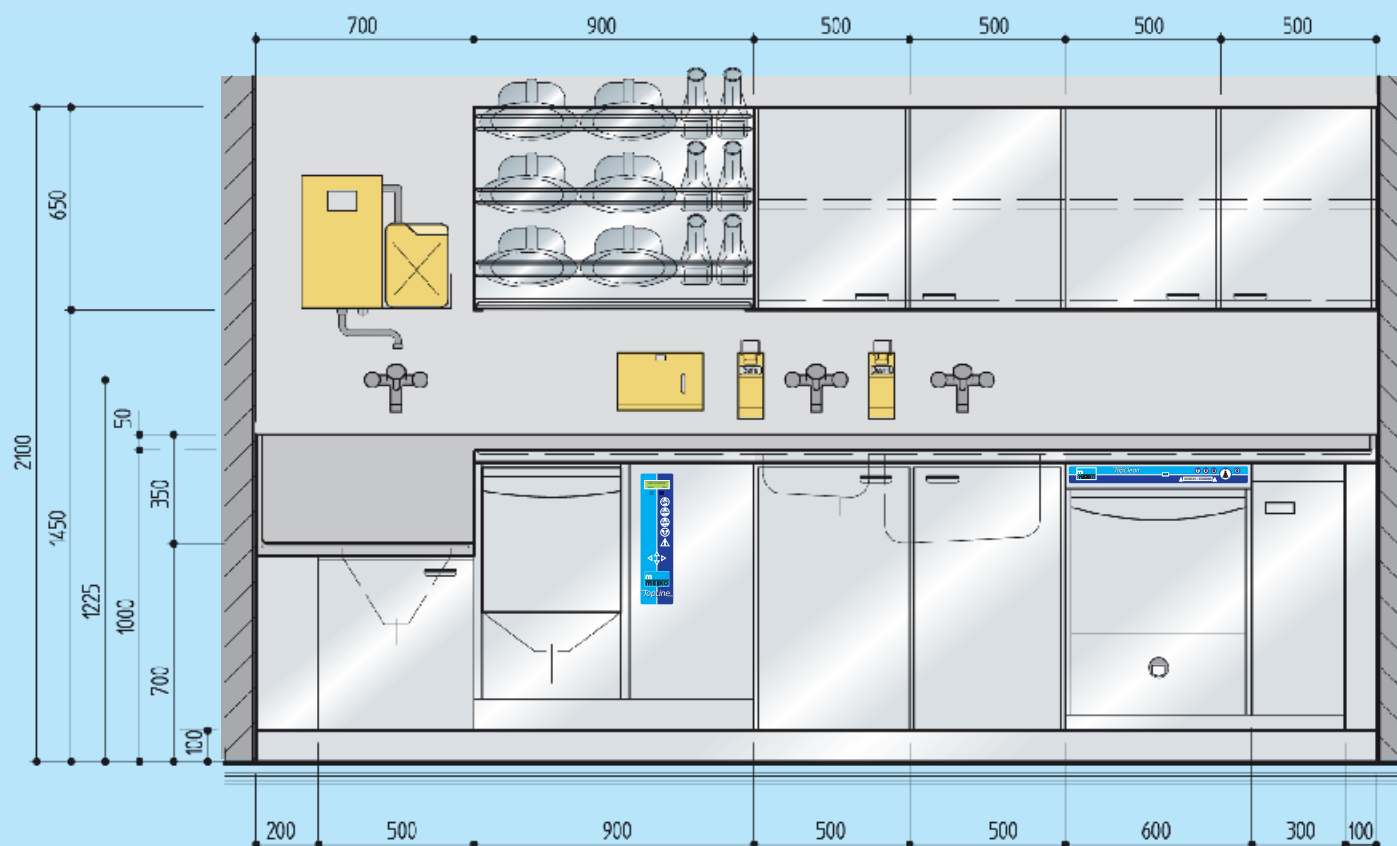



TopClean 60 z AktivPlus

Innowacyjna technologia aktywnej filtracji *AktivPlus* marki MEIKO zapewnia utrzymanie stałej, nienaganej czysto-

ści roztworu myjącego. W połączeniu z efektywnym nabłyszczaniem do osiągnięcia pierwszorzędnych rezultatów

czyszczenia potrzebnych jest jedynie 2,6 l wody na jeden cykl mycia.

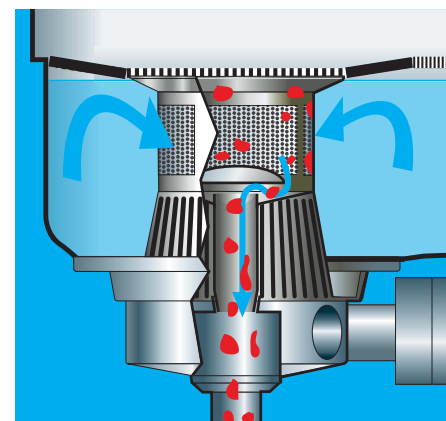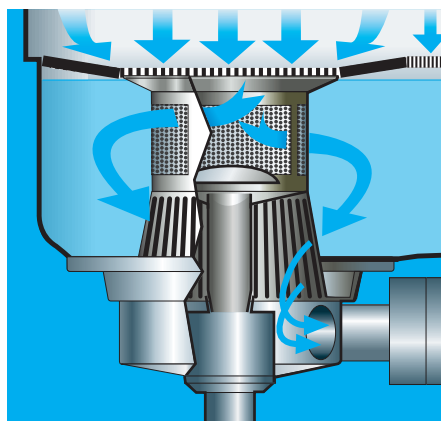

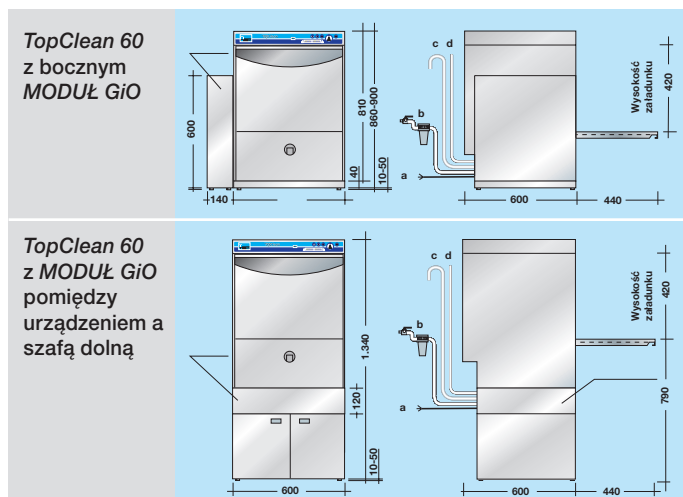

		TopClean 60
Wymiary kosza	mm	500 x 500
Wysokość załadunku	mm	420
Moc pompy	kW	0,55
Pojemność zbiornika	l	11
Zużycie wody płuczącej	l	2,6
Moc zbiornika	kW	4
Moc bojlera	kW	7,5
Całkowity pobór mocy	kW	12,2

Instalacja elektryczna:

Przyłącze elektryczne: ① prąd trójfazowy 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Spełnia wymagania VDE.

Instalacja wodna z funkcją Aqua-Stop:

Urządzenia można podłączać do zasilania wodnego bez dodatkowych zabezpieczeń. Minimalne ciśnienie przepływu 0,6 bara, maksymalne ciśnienie 5 barów.

Podłączenie zgodne z normą EN 1717.

Odpyły 3/4". Odpyły ścienny w miejscu instalacji o wysokości maks. 700 mm ③. Długość przewodów przyłączeniowych ok. 1,4 m od urządzenia.

Instalacja wodna z MODUŁ GiO:

Przyłącze wody zimnej (maks. 35 °C), minimalne ciśnienie przepływu 1 bar, maksymalne ciśnienie 5 barów, przewodność wody niezdatnionej <1000 µS/cm. Łączna twardość wody maks. 28 °dH.

Z zestawem przyłączeniowym ②: zawór odcinający, reduktor ciśnienia, filtr 10 µm z aktywnym węglem. W celu zapewnienia eksploatacji zgodnej z normą DIN wymagany jest separator sieciowy świeżej wody zgodny z EN 1717 (opcja). Długość doływu ok. 3 m.

Zestaw przyłączeniowy urządzenia z węzłem wzmocnionym (bez funkcji Aqua-Stop). Odpyły koncentratu 1/2" ④, długość ok. 2 m. Przewody wody osmotycznej oraz elektryczne między urządzeniem a oddzielnym dostarczoną MODUŁ GiO ok. 3 m.

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ok. 0,18 mmol/l CaCO₃)

